

DETECTOR DE ACUPUNTURA 2ª PARTE

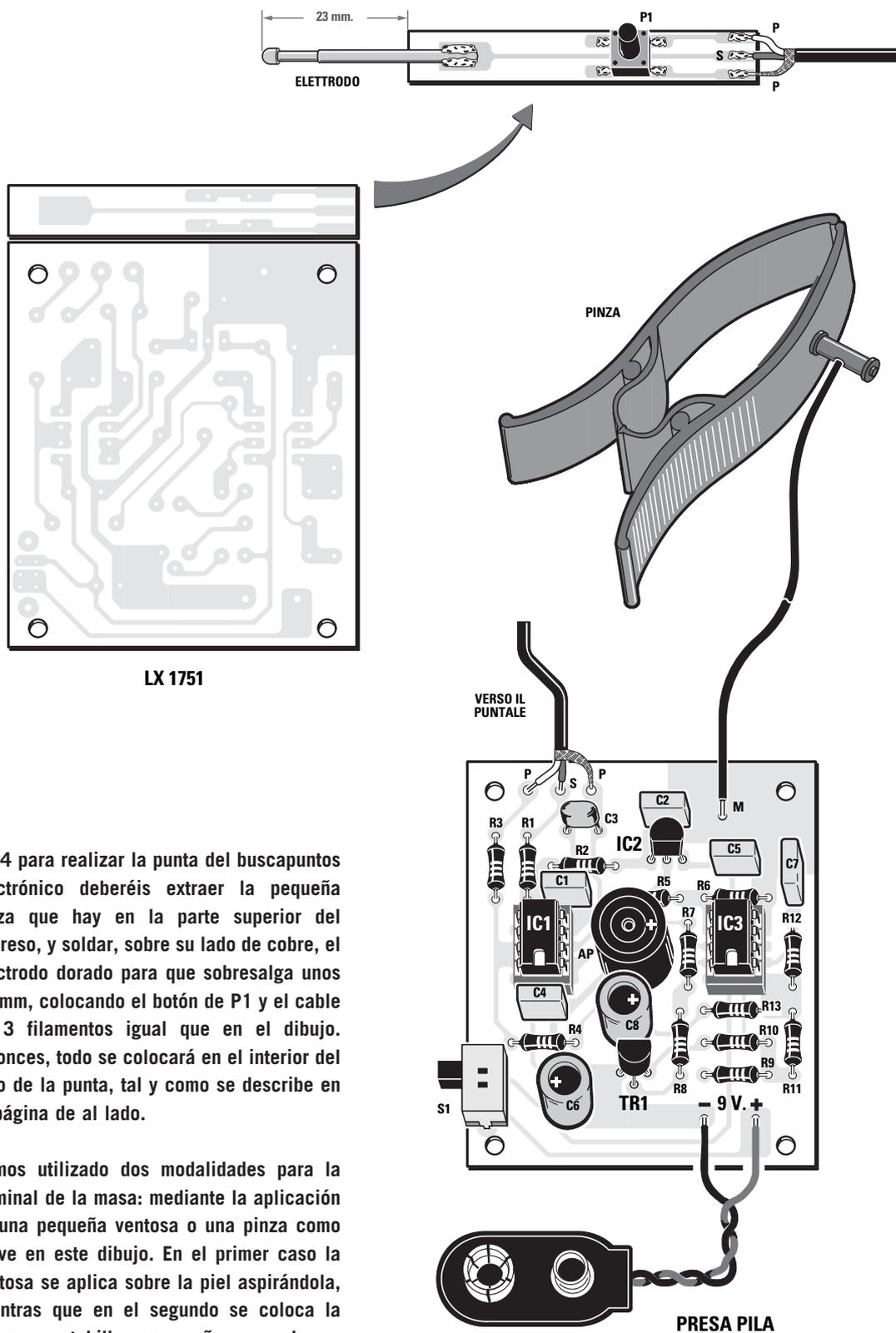


Fig.4 para realizar la punta del buscapuntos electrónico deberéis extraer la pequeña pieza que hay en la parte superior del impreso, y soldar, sobre su lado de cobre, el electrodo dorado para que sobresalga unos 23 mm, colocando el botón de P1 y el cable de 3 filamentos igual que en el dibujo. Entonces, todo se colocará en el interior del tubo de la punta, tal y como se describe en la página de al lado.

Hemos utilizado dos modalidades para la terminal de la masa: mediante la aplicación de una pequeña ventosa o una pinza como se ve en este dibujo. En el primer caso la ventosa se aplica sobre la piel aspirándola, mientras que en el segundo se coloca la pinza en un tobillo o una muñeca, y se busca el punto con la punta.

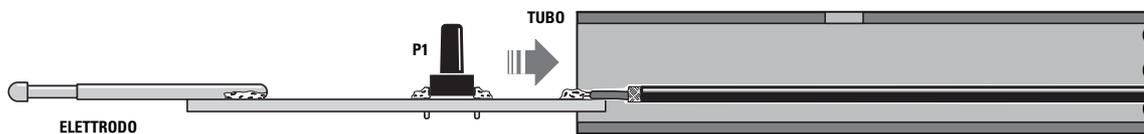


Fig.5 primeramente insertad la pieza del circuito en el impreso dentro del tubo, como se ve en el dibujo.

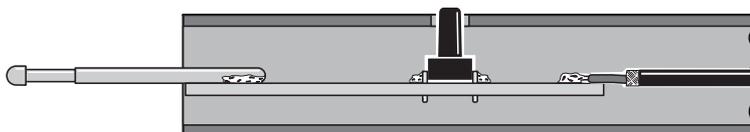


Fig.6 insertad el pin del botón en el pequeño orificio que tiene el tubo. Soldado el electrodo tal cual el dibujo, veréis que sobresaldrá unos 23 mm del tubo.

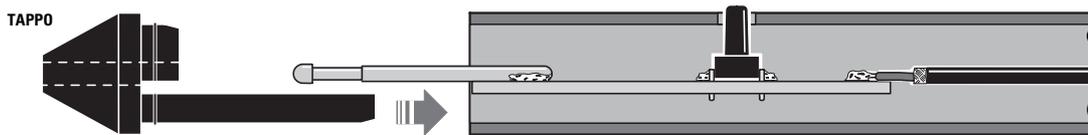


Fig.7 extraed la tapa e insertadla dentro del tubo, para que la guía de plástico se encuentre debajo del impreso como indica la flecha del dibujo.

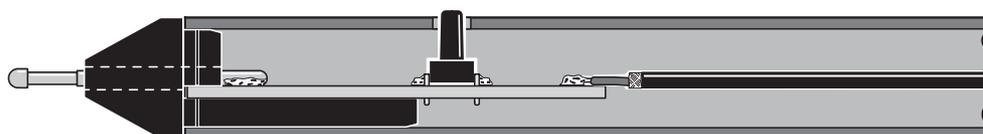


Fig.8 presionad ligeramente la tapa para cerrar el tubo y dejar fuera el extremo del electrodo dorado.

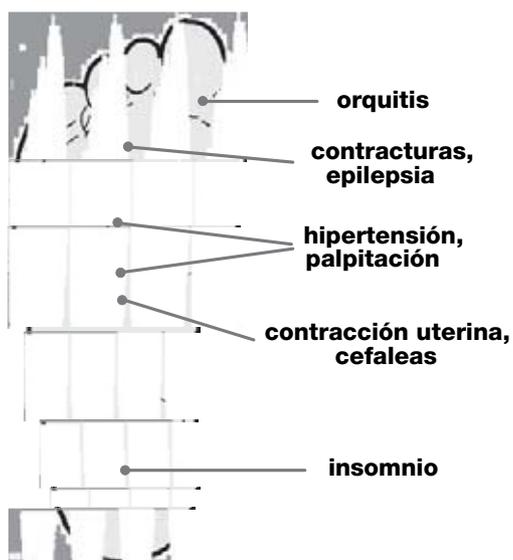
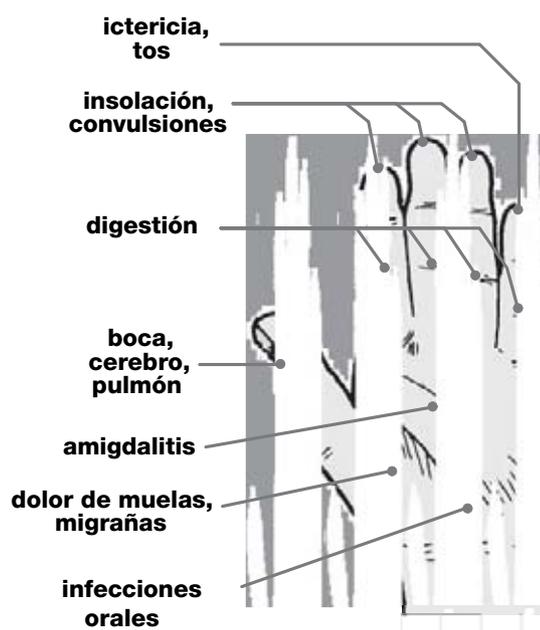
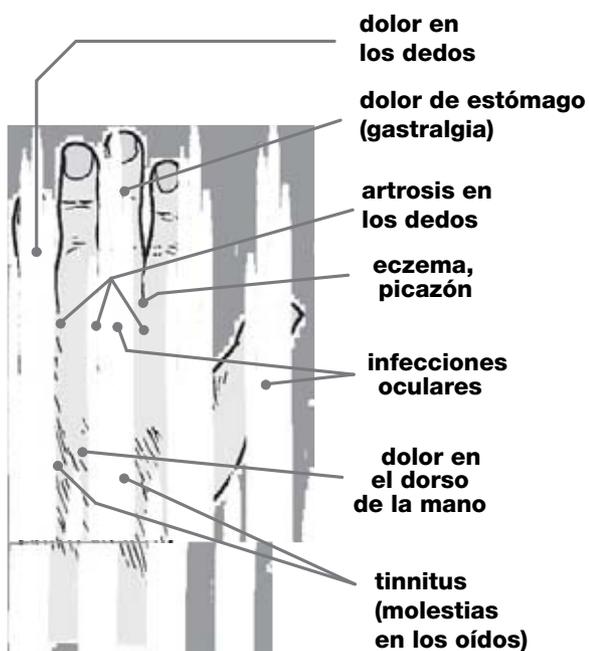


Fig.9 en la foto hemos mostrado una fase del montaje realizada por nosotros, mientras ejecutábamos las pruebas en el laboratorio.

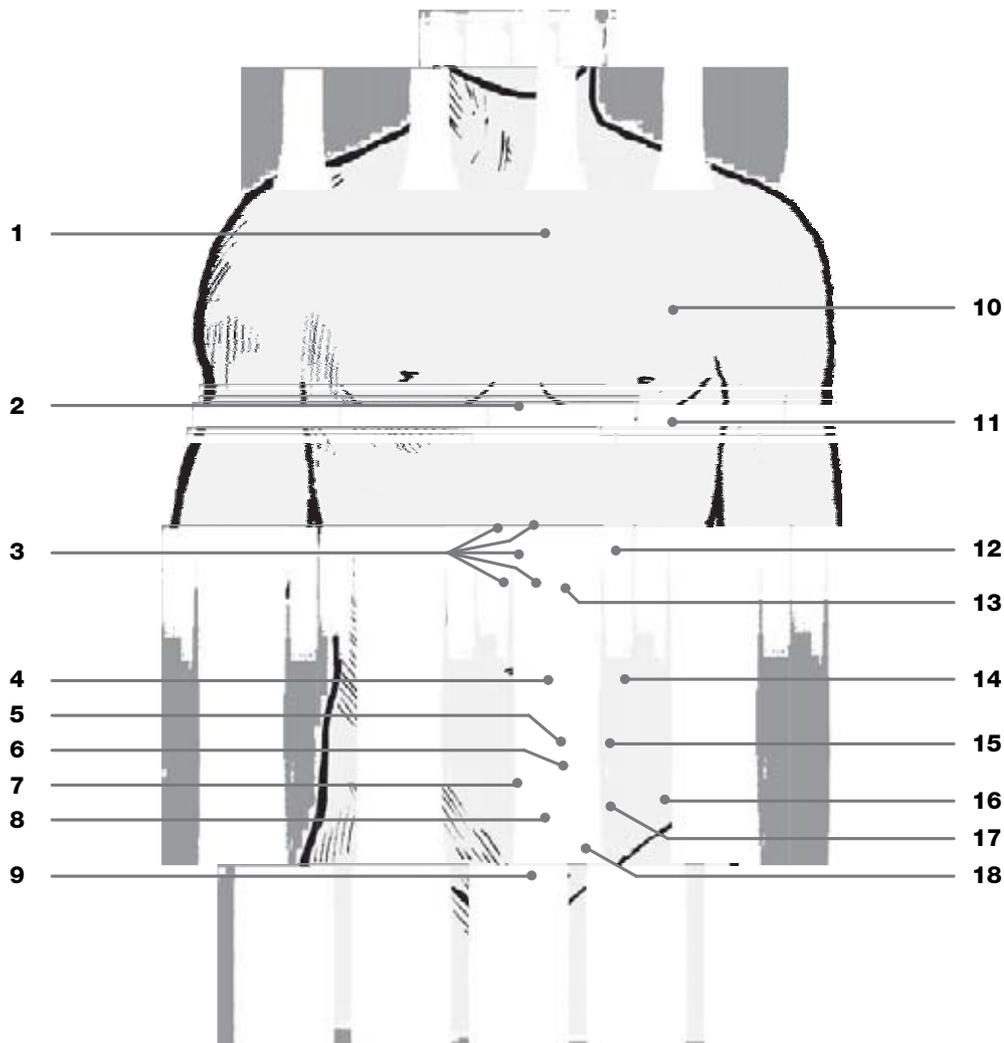


Fig.10 foto de uno de los circuitos con el que realizamos las pruebas. Detrás de la carcasa de plástico hay dos orificios: en uno se introduce el cable pelado que va a la punta, soldando cuidadosamente los tres terminales en sus lugares correspondientes; en el otro, el cable de conexión que va en contacto con la masa, llevado a cabo por una ventosa o pinza.

ALGUNOS PUNTOS DE ACUPUNTURA



Notas: las imágenes publicadas en este artículo han sido extraídas del volumen "Acupuntura Clásica" realizado por U.Lanza.



1 tos, asma, neuralgia intercostal.

2 gastralgia, dolor torácico.

3 gastralgia, úlcera gástrica.

4 enteritis, diarrea, problemas gastro-intestinales.

5 dolor de estómago, flatulencia, anemia, borborigmos.

6 dismenorrea.

7 esterilidad, diarrea infantil.

8 espermatorrea, eyaculación precoz, impotencia.

9 ptosis uterina.

10 traqueítis, asma.

11 neuralgia intercostal.

12 gastralgia y úlcera gástrica, molestias gastro-intestinales, anorexia, hematemesis

13 gastritis y úlcera gástrica, molestias gastro-intestinales, enteritis


14 fuerte traspiración, fatiga en las extremidades

15 retención de orina, estipsis, dismenorrea, enteritis

16 ptosis uterina.

17 hemorragia, epilepsia, esterilidad, cistitis.

18 estipsis, orquitis, ovaritis y leucorrea.

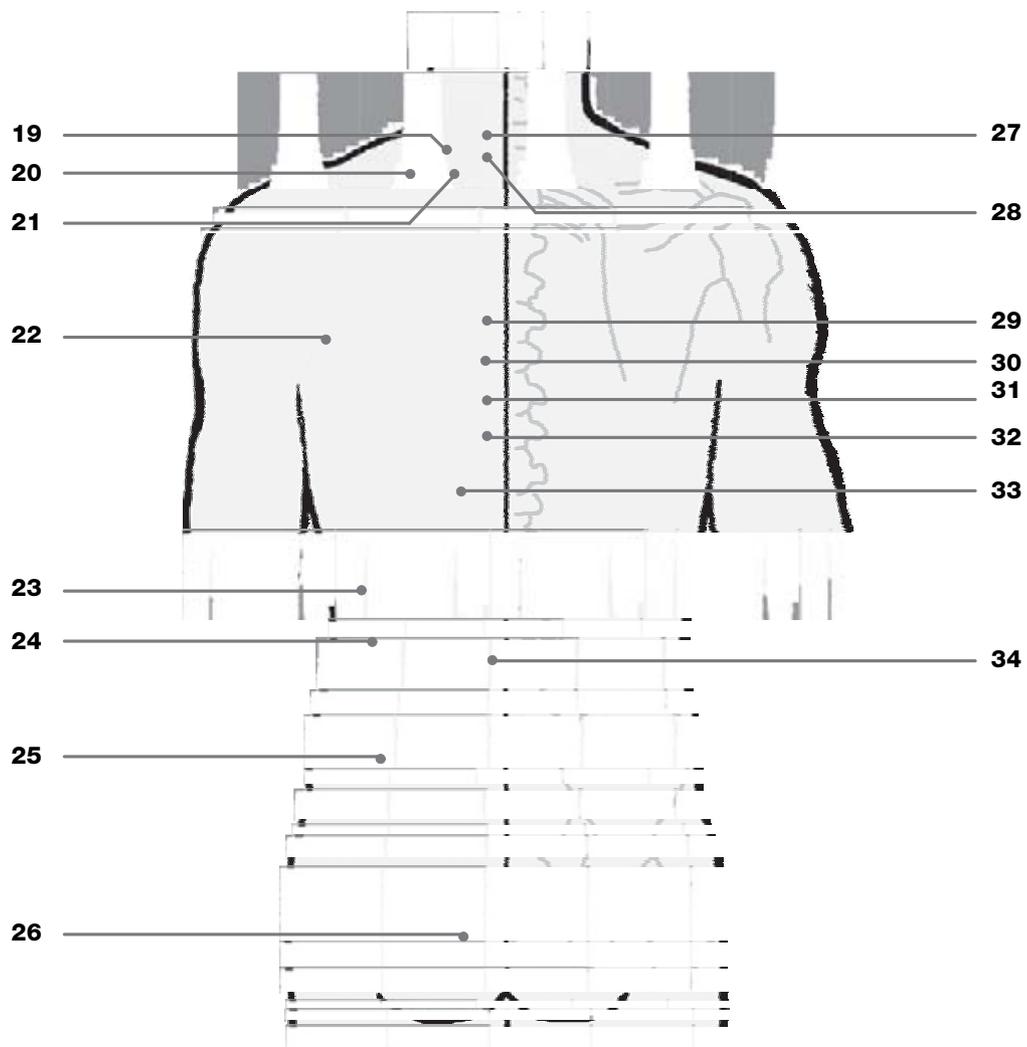

19 híper o hipotensión.

20 T.b.c.

21 asma, infección en los bronquios.

22 dolor de espalda.

23 dolor escapular, histerismo.

24 pulmonía, traqueítis, dolor de tórax, de abdomen, de costado y de los lumbares

25 traqueítis y asma, cardiopatías, neuralgia-intercostal, neurastenia

26 asma; traqueitis y pleuritis, taquicardias.

27 infección de la nariz.

28 amigdalitis aguda o crónica, infección de garganta.

29 gingivitis.

30 asma, infección de los bronquios.

31 disnea, urticaria.

32 urticaria.

33 asma, bronquitis, dolores particulares, adelgazamiento

34 enfermedades mentales.